

Matratzen, Zubehör, Lattenroste

Pflegebettmatratzen, Homecare und Privatbereich



Wie man sich bettet so liegt man!

Wir bieten Ihnen unterschiedliche Matratzen für die verschiedenen Bedürfnisse der zu pflegenden Patienten, Bewohner oder Angehörigen an.

Ihrem Anspruch an Komfort und Dekubitusprophylaxe möchten wir mit einer Auswahl an Pflegebettmatratzen und Matratzen für die häusliche Pflege gerecht werden.

Weiter finden Sie in unserem Sortiment eine Auswahl an Lattenrosten aus Buche Dekor.

Inhaltsverzeichnis:

1. Gut zu wissen!	2
2. PU-Bezüge, Inkontinenzbezüge für Matratzen, Evakuierungsbezüge...	4
3. Unsere Dekupro-Premium Matratzen (Dekubitusprophylaxe)	5
4. Natur Latexmatratze	8
5. Standard Pflegebettmatratzen	9
6. Lattenroste	10

Matratzen, Zubehör, Lattenroste

Pflegebettmatratzen, Homecare und Privatbereich

1. Gut zu wissen!

Schaumstoffmatratzen:	Die klassische Federkern-Matratze wurde fast vollständig verdrängt. So findet heute die Schaumstoffmatratze im Pflegebereich Anwendung, da Sie komfortabel und hygienisch ist und sich darüber hinaus an die Bedürfnisse des Patienten anpassen und die Bewegungen des Körpers unterstützen.
Kaltschaum:	Als Kaltschaum bezeichnet man Polyurethan-Schaum mit offenporiger Beschaffenheit. Er zeichnet sich durch Sprungkraft und Elastizität aus, aufgrund der guten Luftdurchlässigkeit sorgt er für ein gesundes Schlafklima. Zeichnen sich durch eine gute Elastizität und Stützkraft aus.
Viskoelastischer Schaum:	Durch den viskoelastischen Schaum, der auf Polyurethan-Schaum basiert, wird mithilfe von Additiven auf Komfort abgestimmt. Somit ermöglicht diese Matratze ein tiefes Absinken und passt sich dem Körper an. So wird eine optimale Druckentlastung gewährleistet. Diese Matratzen werden zur Dekubitus-Prophylaxe eingesetzt.
Das Raumgewicht:	Als Raumgewicht bezeichnet man das Gewicht eines Kubikmeters Schaumstoff, RG 50 = 50 kg je Kubikmeter.
Härtegrad / Stauchhärte:	Druck, der aufgebracht werden muss, um einen Schaumstoffblock um 40% einzudrücken. Es gilt, je niedriger die Stauchhärte desto weicher ist der Schaum.
Silverprotect:	dauerhafter Schutz vor MRSA und weiteren hochgradig schädlichen Bakterien auf Silberionenbasis)

Latex-Matratzen:	Latexmatratzen sind besonders für Allergiker geeignet, haben eine ausgezeichnete Qualität und entlasten den Körper auf natürliche Weise.
Die Randzone:	Viele unserer Matratzen sind auch lieferbar mit Randzonen. Unsere Prophylaxe-Matratzen haben eine Randzone von ca. 10 cm Breite an der Längsseite der Matratze. Eine Randzone erhöht die Sicherheit und stellt eine Sturzprophylaxe dar, da die Randzone der Pflegebettmatratze das Rausrollen aus dem Pflegebett erschwert.
PU-Nässevollschutz *Silverprotect*	Dauerhafter Schutz vor MRSA und weiteren hochgradig schädlichen Bakterien auf Silberionenbasis.

Matratzen, Zubehör, Lattenroste

Pflegebettmatratzen, Homecare und Privatbereich

2. Übersicht Matratzen

Matratzen Standard-Lieferprogramm	Dekupro Matratzen Premium zur Dekubitus-Prophylaxe und Therapie- Unterstützung				Standard Pflegebettmatratzen		Natur-Latexmatratzen	Schwerlastmatratze
	Viscosoft	Viscocomfort	Medisoft	Viscocomfort XXL Schwergewichtsmatratze	Polyschaum / Kaltschaum	Viscoschaum	Latexmatratze	für Adipositas / bariatrisch
Artikelnummer					2-4201000S			
Maße (B x L x H) *	90x200 cm*	90x200 cm*	90x200 cm*	90x200 cm*	90x200 cm*	90x200 cm*	90x200 cm*	90x200 cm*
Matratzenaufbau	3-schichtig, Höhe 12 cm = VS: 2 cm, KS: 2 cm, KS: 8 cm Höhe 14 cm = VS: 4 cm, KS: 2 cm, KS: 8 cm	2-schichtig, Höhe 14 cm = VS: 5 cm KS: 9 cm Höhe 16 cm = VS: 5 cm, KS: 9 cm	3-schichtig, Höhe 14 cm = KS: 1,5 cm, 3,5 cm Gelastereinlagen und Viscoschaum, KS: 9 cm	3-schichtig, Höhe 20 cm = KS: 4 cm, VS: 5cm, KS: 11 cm	Kaltschaum- matratze Höhe = 12 cm	Viscoschaum Höhe 12 cm = KS: 8cm, VS: 4 cm	Naturlatex Höhe 17 - 18 cm	
Raumgewicht	VS: RG 80, KS: RG 55, KFS RG 40	VS: RG 80, KS RG 55, KFS: RG 40	KS: RG 55 VS: RG 50 KFS:RG 40	VS: RG 80, KS RG 55, KFS: RG 40	RG 40	RG 40	RG 40	
Härte	H 1 - 2 (H 2 - 3)	H 2 - 3	H 1 (H 2)	H 4 - 5			H 2 (H3 - 4)	
bis max. Personengewicht	Höhe 12 + 14 cm max. 100 kg Höhe = 14 cm (H2-3) max.130 kg	Höhe = 14 cm max. 140 kg Höhe = 16 cm max. 160 kg	H 1 max. 100 kg H 2 max. 130 kg	H 4 - 5 max. 250 kg			H 2 max. 85 kg H 3 max. 125 kg H 4 ab 125 kg	
Liegefläche	offenporiger Viscoschaum mit hohem Raumgewicht, Würfelschnitt	offenporiger Viscoschaum mit hohem Raumgewicht, Mehrzonenbohrung	offenporiger SoftKaltschaum, Gelastereinlagen, Würfelschnitt	offenporiger Viscoschau mit hohem Raumgewicht. Mehrzonenbohrung			Naturlatex, offenporig	
Bezug	PU-Bezug, Nässevollschutz Silverprotect**	PU-Bezug, Nässevollschutz Silverprotect**	PU-Bezug, Nässevollschutz Silverprotect**	PU-Bezug, Nässevollschutz Silverprotect**	Gewebe BAUMWOLLE ?	PU-Bezug Nässevollschutz	Anti-Milben 100% Polyester, 270g/m ²	
Reißverschluss	3-seitig verdeckter Reißverschluss, Überlappung Oberseite	3-seitig verdeckter Reißverschluss, Überlappung Oberseite	3-seitig verdeckter Reißverschluss, Überlappung Oberseite	3-seitig verdeckter Reißverschluss, Überlappung Oberseite	2-seitig		Rundum- Reißverschluß, 4 Wendeschlaufen, Bezug teil- / waschbar	
Pflege	waschbar bis 95°C Trockner geeignet bis 60°C	waschbar bis 95°C Trockner geeignet bis 60°C	waschbar bis 95°C Trockner geeignet bis 60°C	waschbar bis 95°C Trockner geeignet bis 60°C	waschbar bis 60°C	waschbar bis 95°C	waschbar bis 60°C	
flammhemmend	●	●	●	●				
Allergiker geeignet	●	●	●	●			●	
Randzonenverstärkung	●	●	●	●	○	○		
integr. Evakuierungsbezug	○	○	○	□	○	○	○	□
Antidekubitus-Matratze	●	●	●	●		●		

○ = optional lieferbar, ● = Standard, □ = nicht lieferbar, * = optional sind alle Matratzen auch in 100 x 200 cm lieferbar, weitere Sondermaße etc. auf Anfrage, ** = Silverprotect, Dauerhafter Schutz vor MRSA und weiteren hochgradig schädlichen Bakterien auf Silberionenbasis. Abkürzungen: VS: Viscoschaum, KS: Kaltschau, KFS: Komfortschaum

m2 handels- und vertriebs GmbH, Oststraße 26, 51766 Engelskirchen-Ründerroth

Tel.: 0 22 63 – 96 17 – 0 Fax: 0 22 63 – 96 17 – 50 Email: info@muehle-mueller.de Internetseite: www.muehle-mueller.de

Matratzen, Zubehör, Lattenroste

Pflegebettmatratzen, Homecare und Privatbereich

3. PU-Bezüge, Inkontinenzbezüge für Matratzen, Evakuierungsbezüge

PU-Bezüge / Inkontinenzbezüge

In Bezug auf die Hygiene kommen oft PU Schutzbezüge zum Einsatz, da diese feuchtigkeits- und Schmutzabweisend sind. Zudem sind diese PU-Bezüge pflegeleicht und atmungsaktiv, dicht gegen Bakterien, Viren und Milben und beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle, Fette und handelsübliche Desinfektionsmittel.

Vorteile der PU-Bezüge / Inkontinenzbezüge:

- ✓ Elastisch
- ✓ Bakterien- und Virendicht
- ✓ Waschbar
- ✓ Klimaregulierend
- ✓ Atmungsaktiv
- ✓ Wasserdicht
- ✓ Desinfizierbar

Der atmungsaktive PU-Nässeschutz-Bezug ist ein hautfreundliches Material, das sich sehr angenehm anfasst und in seiner Funktion einzigartig ist. Feinste Poren sorgen für eine hohe Atmungsaktivität und ein angenehmes Bettklima.

Mit natürlicher, antibakterieller Ausrüstung auf Silberionenbasis, Schutz vor MRSA und weiteren hochgradig schädlichen Bakterien. Schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100, Produktklasse 1.

Fragen Sie diese bitte bei Bedarf an!

4. Das Evakuierungstuch:

Im Notfall zählen oft Minuten und Sekunden. Wir bieten daher Evakuierungshilfen um Bewohner und Patienten schnell aus dem

Gefahrenbereich zu bringen. Mit dem Evakuierungstuch (auch zum Nachrüsten für bestehende Pflegebettmatratzen) kann eine immobile

und liegende Person umgehend aus einem Bett bzw. einem Pflegebett in Sicherheit gebracht werden. Um eine sichere Evakuierung durchzuführen ist nur eine Pflegeperson notwendig. Das robuste Material des Evakuierungstuches ermöglicht mit geringem Kraftaufwand das Ziehen der Person über nahezu alle Bodenbeläge, auch Treppen sind kein Hindernis. Zur Reinigung ist das Evakuierungstuch leicht abnehmbar.



Artikel-Nr. MÜ-EVAK.210.85

Matratzen, Zubehör, Lattenroste

Pflegebettmatratzen, Homecare und Privatbereich

5. Unsere Dekupro-Premium Matratzen (wahlweise auch mit Evakuierungsbezug)

Viscosoft

Dekupro Viscosoft Premium Matratzen

Optimal aufeinander abgestimmte Visco-und Kaltschaumschichten bieten eine effektive Dekubitus-Prophylaxe und Therapieunterstützung.

Durch die sogenannte ViscoSoft-Schicht passt sich diese Matratze den Körperkontouren perfekt an und nimmt dem Patienten / Bewohner die Druckspitzen durch sofortige Druckentlastung.

Die Gewebe- und Gefäßdurchblutung wird gefördert und es wird eine schnelle Schmerzlinderung erreicht.

Die Mittelschicht aus Kaltschaum und die stabile Stützschiicht mit ergonomischem Würfelschnitt sorgen für eine optimale Druckverteilung, Körperunterstützung und Wahrnehmung an zentralen Körperteilen.

Das integrierte Belüftungssystem fördert ein trockenes und angenehmes Bettklima.

Maximale Druckentlastung bei niedriger Matratzenhöhe von 12 cm ist bestens geeignet für z.B. Niedrigbetten oder wenn der Seitengitterabstand eine entscheidende Rolle spielt.



Matratzen Standard-Lieferprogramm	Dekupro Matratzen Premium zur Dekubitus-Prophylaxe und Therapie-Unterstützung
	Viscosoft
Artikelnummer	
Bereich	Standardpflege, Komfort und Dekubitusprophylaxe
Maße (B x L x H) *	90x200 cm*
Matratzenaufbau	3-schichtig, Höhe 12 cm = VS: 2 cm, KS: 2 cm, KS: 8 cm Höhe 14 cm = VS: 4 cm, KS: 2 cm, KS: 8 cm
Raumgewicht	VS: RG 80, KS: RG 55, KFS RG 40
Härte	H 1 - 2 (H 2 - 3)
bis max. Personengewicht	Höhe 12 + 14 cm max. 100 kg Höhe = 14 cm (H2-3) max.130 kg
Liegefläche	offenporiger Viscoschaum mit hohem Raumgewicht, Würfelschnitt
Bezug	PU-Bezug, Nässevollschutz Silverprotect**
Reißverschluss	3-seitig verdeckter Reißverschluss, Überlappung Oberseite
Pflege	waschbar bis 95°C Trockner geeignet bis 60°C
flammhemmend	●
Allergiker geeignet	●
Randzonenverstärkung	●
integr. Evakuierungsbezug	○
Antidekubitus-Matratze	●

Matratzen, Zubehör, Lattenroste

Pflegebettmatratzen, Homecare und Privatbereich

ViscoComfort (Standard und Schwergewichtsmatratze)

Dekupro Viscocomfort Premium Matratzen

Die Liegefläche aus offenporigem Viscoschaum reagiert sensibel auf Druck und Körperwärme, passt sich den Körperkonturen an und vergrößert die Auflagefläche um ca. 50%

Optimale Druckentlastung und Druckverteilung sorgen für eine schnell einsetzende Schmerzlinderung und unterstützen eine verbesserte Gewebe- und Gefäßdurchblutung, die Körperwärme des Patienten wird gespeichert. Für eine bessere Durchlüftung der Matratze und ein trockenes Bettklima sorgen die Klimabohrungen. Die stabile Stützschiene aus Kaltschaum sorgt für eine gleichbleibende Stützwirkung und Körperwahrnehmung. Integrierte Sitzkanten geben sicheren Halt bei der Mobilisierung des Pflegebedürftigen und dienen der vorbeugenden Sturzprophylaxe da die Randzonen ein Herausrollen aus dem Pflegebett erschweren sowie das Abrutschen von der Bettkante.



Matratzen Standard-Lieferprogramm	Dekupro Matratzen Premium zur Dekubitus-Prophylaxe und Therapie- Unterstützung	
	Viscocomfort	Viscocomfort XXL Schwergewichtsmatratze
Artikelnummer		
Bereich		
Maße (B x L x H) *	90x200 cm*	90x200 cm*
Matratzenaufbau	2-schichtig, Höhe 14 cm = VS: 5 cm KS: 9 cm Höhe 16 cm = VS: 5 cm, KS: 9 cm	3-schichtig, Höhe 20 cm = KS: 4 cm, VS: 5cm, KS: 11 cm
Raumgewicht	VS: RG 80, KS RG 55, KFS: RG 40	VS: RG 80, KS RG 55, KFS: RG 40
Härte	H 2 - 3	H 4 - 5
bis max. Personengewicht	Höhe = 14 cm max. 140 kg Höhe = 16 cm max. 160 kg	H 4 - 5 max. 250 kg
Liegefläche	offenporiger Viscoschaum mit hohem Raumgewicht, Mehrzonenbohrung	offenporiger Viscoschaum mit hohem Raumgewicht. Mehrzonenbohrung
Bezug	PU-Bezug, Nässevollschutz Silverprotect**	PU-Bezug, Nässevollschutz Silverprotect**
Reißverschluss	3-seitig verdeckter Reißverschluss, Überlappung Oberseite	3-seitig verdeckter Reißverschluss, Überlappung Oberseite
Pflege	waschbar bis 95°C Trockner geeignet bis 60°C	waschbar bis 95°C Trockner geeignet bis 60°C
flammhemmend	●	●
Allergiker geeignet	●	●
Randzonenverstärkung	●	●
integr. Evakuierungsbezug	○	□
Antidekubitus-Matratze	●	●


Matratzen, Zubehör, Lattenroste

Pflegebettmatratzen, Homecare und Privatbereich

Medisoft

Dekupro Medisoft Premium Matratzen

Medizinisches geprüftes, druckentlastendes Matratzensystem zur Dekubitus-Prophylaxe und Dekubitus-Therapie im 3-Schichtaufbau mit idealer Belüftung für ein trockenes Bettklima. Die Matratze hat eine spezielle Mittelschicht aus Gelrastern im Schulter-, Becken- und Fersenbereich sowie eine Visco-Zwischeneinlage für eine höchst effiziente Druckentlastung durch gleichmäßige Auflagedruckverteilung und verstärkt das komfortable Liegegefühl für den Pflegenden. Die stabile Stützschiene mit ihrem ergonomischen Würfelschnitt sorgt für eine optimale Körperunterstützung und Wahrnehmung des Pflegebedürftigen, zusätzlich wird das Abrutschen von der Bettkante und das Herausrollen aus dem Pflegebett erschwert (Sturzprophylaxe).

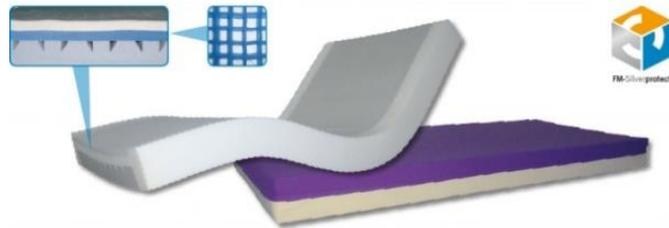

Matratzen Standard-Lieferprogramm	Dekupro Matratzen Premium zur Dekubitus-Prophylaxe und Therapie- Unterstützung
	Medisoft
Artikelnummer	
Bereich	
Maße (B x L x H) *	90x200 cm*
Matratzenaufbau	3-schichtig, Höhe 14 cm = KS: 1,5 cm, 3,5 cm Gelastereinlagen und Viscoschaum, KS: 9 cm
Raumgewicht	KS: RG 55 VS: RG 50 KFS:RG 40
Härte	H 1 (H 2)
bis max. Personengewicht	H 1 max. 100 kg H 2 max. 130 kg
Liegefläche	offenporiger SoftKaltschaum, Gelastereinlagen, Würfelschnitt
Bezug	PU-Bezug, Nässevollschutz Silverprotect**
Reißverschluss	3-seitig verdeckter Reißverschluss, Überlappung Oberseite
Pflege	waschbar bis 95°C Trockner geeignet bis 60°C
flammhemmend	●
Allergiker geeignet	●
Randzonenverstärkung	●
integr. Evakuierungsbezug	○
Antidekubitus-Matratze	●

Matratzen, Zubehör, Lattenroste

Pflegebettmatratzen, Homecare und Privatbereich

6. Natur Latexmatratze 100% - H2 H3 Airstream"

Produkt Natur Latexmatratze:

- ✓ Perfekte Ventilation für einen konstanten Luftstrom
- ✓ Ausgezeichnete Elastizität, Perfekte Unterstützung für den Körper
- ✓ Resistent gegen Schimmel- und Pilzbefall, Resistent gegen Hausstaubmilben
- ✓ Hypoallergen, Respekt für Mensch und Umwelt
- ✓ **Ungestörte und natürliche Erholung**
- ✓ Ruhe ohne Knarren, Quietschen oder andere Geräusche
- ✓ 4 Wendeschlaufen, Rundum-Reißverschluss (Bezug teilbar und einzeln waschbar)
- ✓ versteppt mit 200g/m² Klimahohlfaser-Vlies



Matratzen Standard-Lieferprogramm	Natur-Latexmatratzen
	Latexmatratze
Artikelnummer	
Bereich	Natur / Allergie
Maße (B x L x H) *	90x200 cm*
Matratzenaufbau	Naturlatex Höhe 17 - 18 cm
Raumgewicht	RG 40
Härte	H 2 (H3 - 4)
bis max. Personengewicht	H 2 max. 85 kg H 3 max. 125 kg H 4 ab 125 kg
Liegefläche	Naturlatex, offenporig
Bezug	Anti-Milben 100% Polyester, 270g/m ²
Reißverschluss	Rundum-Reißverschluß, 4 Wendeschlaufen, Bezug teil- / waschbar
Pflege	waschbar bis 60°C
flammhemmend	○
Allergiker geeignet	●
Randzonenverstärkung	□
integr. Evakuierungsbezug	○
Antidekubitus-Matratze	○



Matratzen, Zubehör, Lattenroste

Pflegebettmatratzen, Homecare und Privatbereich

7. Standard Pflegebettmatratzen



Polyschaum-Matratze – Standard

Kaltschaummatratzen weisen eine bessere Durchlüftung auf als übliche Matratzen. Durch die grobe offenporige und unregelmäßige Porenstruktur der Matratze verfügt diese über eine höhere Atmungs-Aktivität und eine extrem gute Feuchtigkeitsdurchlässigkeit. Die Matratzen sind elastisch und federn, d. h. das Liegeverhalten auf einer Kaltschaummatratze ist weniger punktelastisch. Allergiker-geeignet.

Visco-Schaummatratze – Standard

Viscoschaum-Matratzen reagieren auf Körperwärme und passen sich der individuellen Körperform an, sodass ein entspannter Schlaf in jeder Position möglich ist.

Viscoschaum-Matratzen sind besonders für Druckempfindliche Menschen geeignet, und werden im medizinischen Bereich auch zur Prophylaxe von Dekubitus verwendet. Das Körpergewicht ist immer gleichmäßig verteilt, dies führt dazu, dass Druckschmerzen und Durchblutungsstörungen vermieden werden, der Körper entspannen und orthopädisch korrekt auf der Matratze ruhen kann.

Matratzen Standard-Lieferprogramm	Standard Pflegebettmatratzen	
	Polyschaum / Kaltschaum	Viscoschaum
Artikelnummer	2-420100OS	
Bereich	Standardpflege	
Maße (B x L x H) *	90x200 cm*	90x200 cm*
Matratzenaufbau	Kaltschaum-Matratze Höhe = 12 cm	Viscoschaum Höhe 12 cm = KS: 8cm, VS: 4 cm
Raumgewicht	RG 40	RG 40
Härte		
bis max. Personengewicht		
Liegefläche		
Bezug	Gewebe BAUMWOLLE	PU-Bezug Nässevollschutz
Reißverschluss	2-seitig	
Pflege	waschbar bis 60°C	waschbar bis 95°C
flammhemmend		
Allergiker geeignet		
Randzonenverstärkung	○	○
integr. Evakuierungsbezug	○	○
Antidekubitus-Matratze		●

Matratzen, Zubehör, Lattenroste


Pflegebettmatratzen, Homecare und Privatbereich

8. Lattenroste

Hochwertige Technik für das Schlafzimmer – durch den Einsatz des richtigen Lattenrostes erhalten Sie jede Menge Schlafkomfort. Lattenroste eignen sich auch speziell zum Einsatz auf unseren Betteinsätzen, den man einfach in einen Bettrahmen hineinstellt und sofort einsatzbereit ist. So ein Betteinsatz steht i.d.R. mit seinen Füßen selbständig und frei im Bettrahmen und sorgt daher für keinerlei Einschränkungen im wohnlichen Umfeld. Sehr komfortabel und hoch funktionell.

Lattenrost, starr nicht verstellbar

Qualitätsschichtholzrahmen, Einbauhöhe 6cm, Federholzleisten, Härtegradregulierung, Holzart Dekor Buche

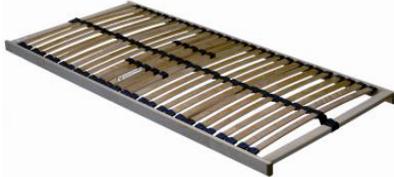

Maße: 90x200cm Artikel: 902.090.06.NV.B.1
100x200cm Artikel: 902.100.06.NV.B.1

Lattenrost mit Kopf- und Fußteilverstellung manuell verstellbar

Qualitätsschichtholzrahmen, Einbauhöhe 6cm, Federholzleisten, Härtegradregulierung, Holzart Dekor Buche



Maße: 90x200cm Artikel: 902.090.06.KF.B.1
100x200cm Artikel: 902.100.06.KF.B.1

Lattenrost elektrisch verstellbar

Qualitätsschichtholzrahmen, Einbauhöhe 6cm, Federholzleisten, Härtegradregulierung, stufenlose Verstellung durch Doppelantrieb 2x3500N, Holzart Dekor Buche

Maße: 90x200cm Artikel: 902.090.06.EL.B.1
100x200cm Artikel: 902.100.06.EL.B.1



Überlängen sowie Sonderbreiten sind bei allen Lattenrost-Modellen auf Wunsch und Anfrage gegen Aufpreis möglich.



M2 handels- und vertriebs GmbH
Oststraße 26
51766 Engelskirchen-Ründerroth
Tel. 0 22 63 – 96 17 – 0
Fax: 0 22 63 – 96 17 – 50
info@muehle.mueller.de
www.muehle-mueller.de



Mühle Müller Pflegebette
Boschstraße 6
35799 Merenberg
Tel. 0 64 71 – 50 65 – 0
Fax: 0 64 71 – 50 65 – 13